

Guide Unitron uMic™



Merci

Merci d'avoir choisi Unitron uMic™.

Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par une perte auditive.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de l'audition pour développer des solutions innovantes et pratiques, accessibles à tous. Parce que l'audition est essentielle.

Votre uMic

Professionnel de l'audition : _____

Téléphone : _____

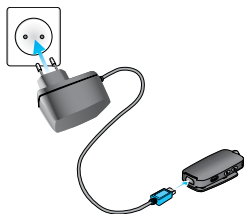
Numéro de série uMic : _____

Garantie : _____


Date d'achat : _____

Référence rapide


Charger l'uMic




Marche/Arrêt

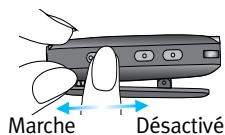

Porter l'uMic

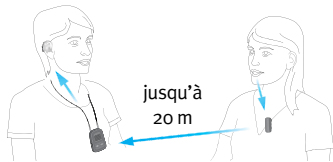

Appairage à Bluetooth

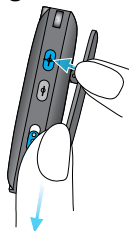

Voyant




Mise en MARCHÉ		Vert pendant 2 secondes
ARRÊT		Rouge pendant 2 secondes
En charge		Rouge fixe
Avertissement de pile faible		Clignotement court rouge en plus du voyant principal
Transmission		Bleu fixe
Transmission en pause		Clignotement court bleu
Mode de couplage		Clignotement rapide bleu

Table des matières

Votre uMic en un coup d'œil	2
Premiers pas	4
Charge de l'uMic	5
Mise en marche/arrêt de l'uMic.....	7
Couplage de l'uMic avec l'uDirect 2	8
Préparation de l'uDirect 2	12
Connexion de l'uMic et de l'uDirect 2	13
Test de fonctionnement de l'uMic.....	14
Réglage du volume de l'uMic.....	15
Port correct de l'uMic	16
Mise en pause et reprise de l'uMic	17
Mise hors tension de l'uMic.....	18
Cas d'utilisation particuliers	19
Guide de dépannage	24
Avertissements	29
Informations de conformité	33
Informations et explications relatives aux symboles.....	35

Votre uMic en un coup d'œil

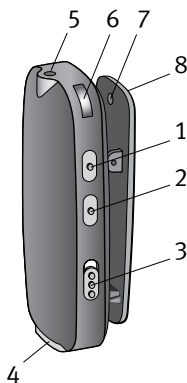- 1 Augmentation du volume (+)
- 2 Baisse du volume (-)
- 3 Bouton Marche/Arrêt (I/O)
- 4 Entrée de chargement (mini-USB)
- 5 Ouverture de microphone
- 6 Voyant d'état
- 7 Oeillet pour cordon
- 8 Clip de retenue




Accessoires

(contenu pouvant varier en fonction du pays)

Câble mini-USB double (1 entrée/2 sorties)

Cordon

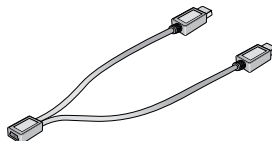Housse de protection



Autres accessoires en option

Cordon d'alimentation mini-USB Unitron

Adaptateur pour chargeur de voiture 12 V



Outre vos aides auditives sans fil Unitron, une solution de transmission compatible est requise. Dans ce guide d'utilisation, l'uDirect™ 2 est présenté en exemple. Étant donné que l'émetteur uMic est doté de la technologie Bluetooth®, il se peut que d'autres récepteurs Bluetooth soient compatibles. Cependant, l'uMic est optimisé pour une utilisation avec Unitron uDirect 2.

Premiers pas

Le système est composé de trois éléments principaux :

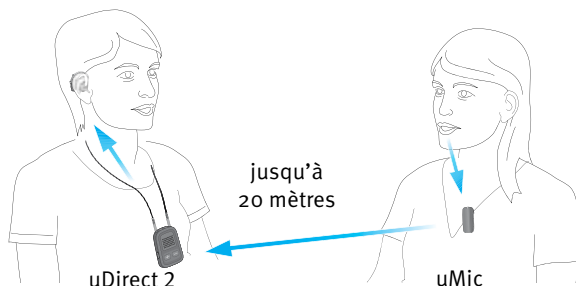
- uMic
- Aides auditives Unitron
- Unitron uDirect 2

L'uMic transmet, sans fil, la voix de l'interlocuteur vers vos aides auditives via le dispositif de transmission uDirect 2.

Une fois le signal de l'uMic reçu, le niveau du microphone des aides auditives s'ajuste automatiquement. Le niveau de réglage est défini par votre professionnel de l'audition.

porteur d'aides auditives

7 Ecouteur




Charge de l'uMic

Votre uMic est doté d'une batterie rechargeable non amovible intégrée. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote en rouge.

Procédure de chargement :

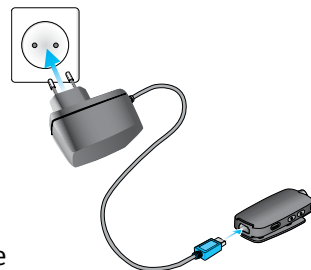1. Insérez le cordon d'alimentation Unitron fourni avec l'uDirect 2 dans l'entrée mini-USB de l'uMic.



2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

En règle générale, le temps de chargement est de deux heures. Une fois le chargement terminé, le voyant s'allume en vert de manière fixe.



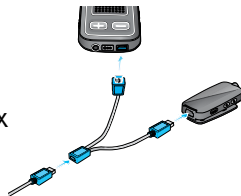
La première fois que vous chargez l'uMic, laissez-le en charge pendant au moins trois heures, même si l'indicateur de batterie n'est pas allumé ou devient vert avant ce laps de temps.

Utilisation d'un cordon d'alimentation pour deux appareils :

Insérez le câble mini-USB double entre le câble d'alimentation et les appareils, comme indiqué ci-dessous.


Avec uDirect 2 :

Il est possible de charger deux appareils en même temps.



Avec uTV 2 :

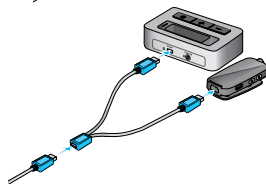
Il est possible de charger l'uMic tout en utilisant l'uTV™ 2.



Vous pouvez laisser l'uMic connecté au chargeur toute la nuit en toute sécurité.

Mise en marche/arrêt de l'uMic

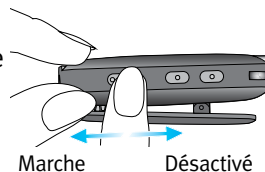Faites glisser le bouton Marche/Arrêt (U/O) comme indiqué pour allumer ou éteindre l'uMic.




Mode veille

Si après 30 minutes, aucun dispositif de transmission (uDirect 2, par exemple) n'est détecté, l'uMic se met hors tension pour économiser la batterie, même si le bouton Marche/Arrêt est en position de marche.


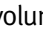
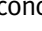
Pour quitter le mode veille, éteignez l'uMic, puis rallumez-le.



Couplage de l'uMic avec l'uDirect 2

Avant d'utiliser l'uMic avec un dispositif de transmission pour la première fois, les appareils doivent être couplés entre eux.


 Si vous utilisez un dispositif de transmission autre qu'uDirect 2, suivez la procédure de couplage Bluetooth de l'appareil en question.

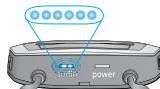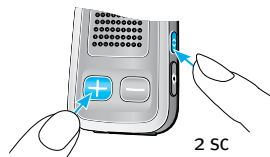Mettre l'uDirect 2 en mode de couplage :


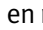

1. Mettez l'uDirect 2 sous tension (.
2. Appuyez simultanément sur le bouton de connexion () et sur le bouton de volume () et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant audio commence à clignoter rapidement en bleu. L'uDirect 2 reste en mode de couplage pendant deux minutes ou quitte ce mode une fois le couplage terminé.




Mettre l'uMic en mode de couplage :

 Si l'uMic n'a jamais été couplé auparavant, le mode de couplage est automatiquement activé une fois l'appareil allumé.

Pour lancer manuellement le mode de couplage :

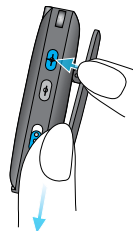
1. Mettez l'uMic hors tension.
2. Appuyez sur le bouton de volume () et maintenez-le enfoncé.
3. Mettez l'uMic sous tension tout en maintenant le bouton () enfoncé.
4. Relâchez le bouton () au bout de deux secondes, dès que le voyant clignote rapidement en bleu.
5. Veillez à ce que l'uDirect 2 et l'uMic ne se trouvent pas à plus d'un mètre l'un de l'autre.




L'uMic restera en mode de couplage pendant deux minutes ou quittera ce mode une fois le couplage terminé.

Fin du couplage :











Patiencez jusqu'à ce que les voyants s'allument en bleu de manière fixe. En règle générale, cela ne prend que quelques secondes. Toutefois, cette procédure peut durer jusqu'à 2 minutes.

 Il est possible d'appairer l'uMic avec quatre appareils au maximum. Si vous souhaitez coupler un cinquième appareil, celui-ci remplacera le premier appareil couplé.








 Deux appareils ne doivent être couplés qu'une seule fois. Une fois éteints, les appareils restent couplés et se connectent automatiquement après leur remise sous tension.


Signification du voyant d'état

Informations utiles lorsque l'appareil est en marche :

	 uMic	 uDirect 2
Mise en MARCHÉ	Vert pendant 2 secondes 	Vert pendant 2 secondes 
Transmission	Bleu fixe 	Bleu fixe 
Transmission en pause	Clignotement court bleu 	Clignotement court bleu 
Mode de couplage	Clignotement rapide bleu 	Clignotement rapide bleu 

Informations relatives à l'alimentation et à la batterie :

Mise en MARCHÉ	Vert pendant 2 secondes 
ARRÊT	Rouge pendant 2 secondes 
En charge	Rouge fixe 
Batterie chargée	Vert fixe 
Avertissement de pile faible	Clignotement court rouge en plus du voyant principal  
uMic en veille ou hors tension	Voyant éteint 


 Pour quitter le mode veille, mettez l'uMic hors tension, puis rallumez-le.

Lorsque le voyant rouge de batterie faible clignote : 

Le niveau de la batterie est <20 %

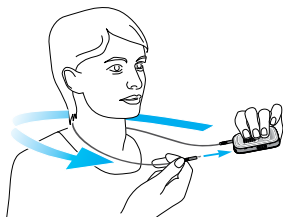
Il reste moins d'une heure et demi pour effectuer la transmission


Songez à recharger l'uMic

 Il est également possible de charger l'uMic tout en l'utilisant.

Préparation de l'uDirect 2

1. Mettez l'uDirect 2 sous tension.
2. Portez toujours l'uDirect 2 autour du cou.
3. Assurez-vous que les deux fiches ~~sont~~ bien connectées aux prises du cordon.



 Pour plus d'informations sur l'uDirect 2, reportez-vous au guide d'utilisation uDirect 2.


Connexion de l'uMic et de l'uDirect 2

À chaque mise sous tension des appareils, ces derniers se connectent automatiquement l'un à l'autre.

1. Veillez à ce que l'uDirect 2 et l'uMic ne se trouvent pas à plus de deux mètres l'un de l'autre.
2. Mettez l'uMic sous tension.
3. Le voyant devient alors vert.
4. Attendez que les voyants des deux appareils s'allument en bleu de manière continue. En règle générale, cela prend 5 secondes, mais cette procédure peut durer jusqu'à 30 secondes.

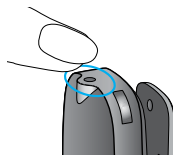


L'uDirect 2 confirme la connexion au moyen de notifications vocales ou de bips dans l'appareil auditif, selon la configuration de l'uDirect 2.

 Si le voyant d'état clignote rapidement en bleu une fois l'uMic sous tension, ou s'il ne s'allume pas en bleu de manière continue au bout de deux minutes, répétez le processus de couplage.

Test de fonctionnement de l'uMic

Avant d'utiliser le système, effectuez un rapide test de fonctionnement en tapotant délicatement sur l'ouverture de microphone.



Vous devez entendre clairement les bruits émis dans vos aides auditives.



En principe, aucune ligne de visée n'est requise entre l'uMic et le dispositif de transmission. Si la transmission audio s'arrête brusquement, consultez le guide de dépannage.

Réglage du volume de l'uMic

Pour modifier le volume de l'uMic :

1. Parlez dans l'uMic à une distance de 20 cm.
2. Utilisez les boutons de volume (+/-) pour régler le volume de l'uMic à un niveau confortable.



Si vos aides auditives captent trop le bruit ambiant, suivez les deux étapes ci-après pour que l'uMic puisse cibler davantage le bruit:

1. Réduisez le volume des aides auditives en appuyant sur le bouton (-) de l'uDirect 2.
2. Augmentez ensuite le volume de l'uMic en appuyant sur le bouton (+) de l'uMic.



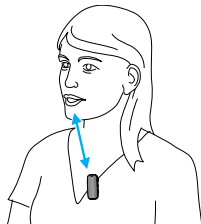
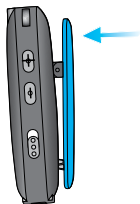
Le paramètre de volume de l'uMic est enregistré même lorsque ce dernier est éteint.



Votre professionnel de l'audition peut modifier le niveau des microphones des aides auditives tout en utilisant l'uMic pour régler le volume des sons environnants.

Port correct de l'uMic


1. Appuyez délicatement pour ouvrir le clip.
2. Assurez-vous que l'uMic soit correctement fixé sur le vêtement, comme indiqué sur la photo.
3. Pour éviter tout bruit de frottement, ne recouvrez pas l'uMic avec des vêtements lorsque vous l'utilisez.



Distance par rapport à la bouche de l'interlocuteur :

La distance optimale est 20 cm.

La distance ne doit pas être supérieure à 50 cm pour obtenir des performances audio uniformes.

 Plus le bruit ambiant est élevé, plus l'uMic doit être proche de la bouche de l'interlocuteur.

 N'utilisez pas de cordon autour du cou lors de la transmission. Tout bruit de frottement peut nuire à la qualité du son.

Mise en pause et reprise de l'uMic

Pour interrompre la transmission audio à partir de votre uMic, appuyez sur le bouton d'accès (A) de l'uDirect 2.



Lors d'une pause :

Les indicateurs de transmission clignotent en bleu sur les deux appareils.

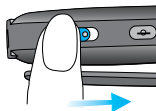
Vos aides auditives reviennent au programme le plus récent.

Il est impossible de modifier les programmes des aides auditives via le bouton d'accès d'uDirect 2 au cours de la transmission ou lors de l'interruption de cette dernière.

Pour reprendre la transmission de l'uMic, appuyez de nouveau sur le bouton d'accès (A) de l'uDirect 2.


Mise hors tension de l'uMic

Pour arrêter totalement la transmission de l'uMic, mettez l'uMic hors tension en faisant coulisser le bouton Marche/Arrêt sur la position arrêt.



 Une fois en position d'arrêt, le marquage blanc disparaît.

Mettez l'uMic hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

 Si la connexion de l'uMic au dispositif de transmission est perdue pendant plus de 30 minutes, l'uMic passe directement en mode veille pour économiser la batterie. Le voyant s'éteint et il faut relancer l'uMic (mise hors tension et remise sous tension) pour reprendre la transmission.

Cas d'utilisation particuliers

Utiliser l'uMic et passer des appels téléphoniques

Les appels téléphoniques via Bluetooth sont toujours prioritaires sur la transmission de l'uMic.

Si uDirect 2 est couplé avec votre téléphone portable, vous pouvez tout de même recevoir des appels téléphoniques, même lorsque vous utilisez l'uMic. En cas d'appel entrant, l'uDirect 2 arrête automatiquement de transmettre les signaux audio depuis l'uMic et les envoie depuis votre téléphone portable vers vos aides auditives.



Pour accepter un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton d'accès (A) de l'uDirect 2 lorsque vous entendez la sonnerie dans vos aides auditives. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'accès pour mettre fin à l'appel.

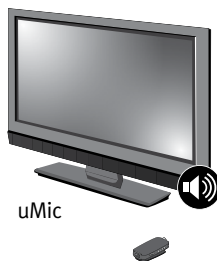
Utiliser l'uMic et regarder la télévision

Pour garantir un son stéréo de haute qualité sur votre téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser l'uTV 2 approprié.

Lorsqu'une sortie audio d'un téléviseur analogique n'est pas disponible ou lors d'un déplacement, il est possible d'utiliser l'uMic pour améliorer la qualité du son lorsque vous regardez la télévision.

Pour obtenir des résultats optimaux :

1. Essayer de localiser le haut-parleur du téléviseur.
2. Mettez l'uMic à 20 cm du haut-parleur.
3. Il peut être judicieux de laisser le chargeur branché lorsque vous regardez la télévision.




Distance de transmission de l'uMic

L'émetteur uMic fonctionne dans un rayon de 20 m. Aucune ligne de visée n'est requise entre votre uDirect 2 et l'uMic. Les interférences causées par les objets présents dans la ligne de visée peuvent réduire la portée de fonctionnement.

Lorsque l'uMic est placé hors de la portée de l'uDirect 2, la transmission audio sans fil est interrompue, voire même annulée. Ensuite, une fois l'uMic replacé dans la portée de l'uDirect 2, la transmission vers vos aides auditives reprend automatiquement.

10 secondes peuvent s'écouler avant que la transmission ne reprenne.

 Si la transmission a été interrompue pendant plus de 30 minutes, il peut s'avérer nécessaire de mettre l'uMic hors tension et de le rallumer.

Prise en charge de plusieurs uMic

Il est impossible de transmettre des signaux audio simultanément depuis deux uMic vers un uDirect 2.

Toutefois, il est possible d'appairer deux uMic à un uDirect 2 et d'y accéder de manière séquentielle en appuyant sur le bouton d'accès de l'uDirect 2. Après avoir appuyé sur ce bouton, l'uDirect 2 sélectionne l'uMic suivant dans l'ordre défini.

 Si un téléphone portable est déjà connecté à l'uDirect 2, un seul uMic peut être pris en charge.

Utilisation du cordon

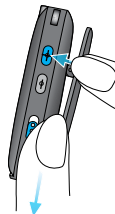
Pour transporter l'appareil, vous pouvez utiliser le cordon détachable, comme illustré ci-contre.



Suppression de tous les couplages Bluetooth

Si vous rencontrez des problèmes avec l'un des appareils couplés ou si un appareil cesse de se connecter à votre uMic, vous pouvez supprimer tous les couplages depuis l'uMic.

1. Mettez l'uMic sous tension tout en maintenant enfoncé le bouton (+) pendant 10 secondes. Tous les couplages sont alors supprimés.
2. Lorsque le voyant bleu devient vert, relâchez le bouton (+).



Le fait de supprimer le couplage des appareils Bluetooth empêche toute connexion à un appareil Bluetooth précédemment couplé. Vous devez effectuer une nouvelle fois le processus de couplage (voir page 8) si vous souhaitez vous reconnecter.

 Une fois les couplages supprimés, le voyant d'état clignote rapidement en bleu pendant quelques secondes (mode de couplage automatique).

Guide de dépannage

Causes les plus probables	Solution
Je n'entends aucun son par l'uMic	
L'un des appareils ou tous les appareils sont hors tension	Assurez-vous que tous les appareils (uMic, dispositif de transmission, aides auditives) soient sous tension et opérationnels
L'uMic est en mode pause (voyant d'état clignotant en bleu)	Appuyez brièvement sur le bouton d'accès de l'uDirect 2 pour reprendre la transmission
L'uDirect 2 et l'uMic sont trop éloignés l'un de l'autre	Rapprochez les appareils l'un de l'autre (20 mètres maximum). Pour éviter toute interruption de la transmission, veillez à porter correctement l'uDirect 2 et à laisser l'uMic dans la portée de fonctionnement
Un obstacle empêche la transmission	Selon l'appareil, une ligne de visée peut s'avérer nécessaire

Causes les plus probables	Solution
J'entends des interférences lors de la transmission des signaux audio	
L'uMic est trop éloigné de l'uDirect 2 ou quelque chose fait obstacle	Ne dépassez pas la distance maximale et repositionnez l'appareil
Une fois sous tension, l'uDirect 2 recherche d'autres appareils couplés pendant 2 minutes. Cela peut entraîner la perte du signal audio	Au bout de 2 minutes, l'uDirect 2 arrête de rechercher d'autres appareils et les interférences cessent
Le volume lors de la transmission n'est pas approprié (trop faible ou trop élevé)	
Les niveaux de volume ne sont pas correctement réglés	Réglez le volume à l'aide des boutons de volume (+) (-) de l'uDirect 2. Il est également possible de régler le volume avec les boutons (+) (-) de l'uMic

Causes les plus probables	Solution
---------------------------	----------

Il y a trop de bruit et je ne comprends pas ce que dit mon interlocuteur

Les microphones de vos aides auditives sont réglés trop fort	Réduisez le volume des aides auditives en appuyant sur le bouton (−) de l'uDirect 2 jusqu'à atteindre le niveau sonore qui vous convienne. Rapprochez l'uMic de la bouche de l'interlocuteur (20 cm). Utilisez le bouton (+) de l'uMic pour augmenter le volume de l'uMic
--	---

L'uMic frotte contre les vêtements de la personne appareillée	Assurez-vous que l'uMic soit bien fixé. Aucun vêtement ne doit couvrir l'uMic
---	---

Les réglages de vos aides auditives ne sont pas appropriés	Demandez à votre professionnel de l'audition de régler vos aides auditives
--	--

Causes les plus probables	Solution
---------------------------	----------

L'uMic n'est plus reconnu par l'uDirect 2 avec lequel il a été précédemment appairé

Après 2 minutes sans détecter d'appareil, l'uDirect 2 cesse de rechercher des appareils afin d'économiser la batterie	Mettez l'uDirect 2 hors tension. Attendez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation rouge s'éteigne, puis rallumez l'appareil
---	---

Les appareils sont trop éloignés les uns des autres	Rapprochez les appareils à un mètre les uns des autres, puis réessayez
---	--

Il est possible de coupler l'uMic avec 4 appareils Bluetooth différents au maximum (jusqu'à 8 pour l'uDirect 2). Si la mémoire interne est pleine, le cinquième appareil couplé remplacera le premier	Répétez le processus de couplage pour chaque appareil
---	---

Le couplage n'a jamais été fait ou a été supprimé manuellement	Répétez le processus de couplage pour chaque appareil
--	---

Le voyant ne s'allume pas en bleu de manière fixe

L'uMic et l'uDirect 2 ne sont pas couplés	Répétez le processus de couplage pour chaque appareil
---	---

Causes les plus probables

Solution

Le voyant clignote rapidement en bleu sur l'uMic

L'uMic est en mode de couplage	Procédez au couplage
--------------------------------	----------------------

Les voyants s'allument en bleu de manière fixe, mais aucun son ne sort de l'uMic

L'uDirect 2 se situe hors de la portée de fonctionnement des aides auditives	Portez l'uDirect 2 autour du cou et installez correctement le cordon
--	--

L'uDirect 2 n'est pas correctement programmé pour vos aides auditives	Demandez à votre professionnel de l'audition de reconfigurer votre uDirect 2 et les aides auditives
---	---

Le chargement prend plus de temps que prévu

L'appareil est utilisé lors du chargement	Il est possible de charger et d'utiliser l'appareil en même temps. Toutefois, le chargement dure alors 30 % plus longtemps (>2 heures)
---	--

Le chargeur ne fournit pas assez de courant de charge	Utilisez uniquement les chargeurs approuvés par Unitron
---	---

Pour tout problème non traité dans ce guide d'utilisation, contactez votre professionnel de l'audition.

Avertissements



Lisez attentivement la section correspondante dans le guide d'utilisation Unitron uDirect 2 fourni avec chaque uDirect 2.

Avertissements de danger



Rangez cet appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.



Des interférences sont possibles avec les appareils médicaux. Ces appareils Unitron utilisent une transmission numérique codée basse puissance pour toute communication vers vos aides auditives. Bien que rares, des interférences avec des dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques sont possibles. Par conséquent, il est interdit aux personnes portant des appareils médicaux (stimulateur cardiaque, par exemple) d'utiliser cet appareil.



Utilisez uniquement des aides auditives ayant été programmées spécialement pour vous par votre professionnel de l'audition.









Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les chargeurs fournis par Unitron ou des chargeurs stabilisés 5 V CC, 250 mA au minimum.

Informations importantes

- ⚠ Ne chargez pas l'uMic à partir du port USB d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable, sous peine d'endommager votre équipement.
- ⚠ Il est interdit d'apporter des modifications à un appareil sans l'autorisation expresse d'Unitron.
- ⚠ Il est possible de connecter des appareils externes, à condition qu'ils aient été testés conformément aux normes IECXXXXX. Utilisez uniquement les accessoires approuvés par Unitron.
- ⚠ Seul un technicien agréé est autorisé à remplacer la batterie. Afin d'éviter toute blessure ou d'endommager le produit, n'essayez ni d'ouvrir celui-ci ni de retirer la batterie.
- ⚠ Mettez les composants électroniques au rebut conformément aux réglementations locales.
- ⚠ Utilisez le port mini-USB uniquement dans le but préconisé.

Informations relatives à la sécurité du produit

-  Mettez l'uMic hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.
-  Le cordon de l'uDirect 2 doit toujours être branché et porté autour du cou lors de la transmission des signaux à vos aides auditives.
-  Protégez les connecteurs, les fiches, l'emplacement de chargement et l'alimentation de l'appareil contre les débris et la poussière.
-  Protégez tous les appareils contre toute humidité excessive (zone de baignade, piscine), toute source de chaleur (radiateur, dessus d'un téléviseur), ainsi que toute vibration et tout choc excessif.
-  Nettoyez les appareils à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ménager (lessive en poudre, savon, etc.) ou d'alcool pour les nettoyer. Ne séchez jamais un appareil à l'aide d'un micro-ondes ou de tout autre appareil chauffant.
-  La technologie de transmission inductive numérique codée, utilisée dans ces appareils, est extrêmement fiable et n'engendre presque aucune interférence avec d'autres appareils. Remarque : lorsque vous utilisez le système à proximité d'un équipement informatique, d'une

installation électronique ou de tout autre champ électromagnétique puissant, il est recommandé de l'installer à au moins 60 cm de l'appareil émettant des interférences afin d'en assurer le bon fonctionnement.



Les rayons X, les scanners et les IRM peuvent nuire ou altérer le bon fonctionnement des appareils.



N'utilisez pas ces appareils dans des zones où les équipements électroniques sont interdits.

Autres informations importantes



L'uMic est compatible avec Bluetooth 2.1. Sa technologie de transmission sans fil est optimisée pour les dispositifs de transmission Unitron, tels qu'uDirect 2, sans se limiter toutefois à ces dispositifs.



L'utilisation de l'uMic avec des dispositifs de transmission autres qu'Unitron n'est pas prise en charge par Unitron.

Informations de conformité

Déclaration de conformité

Unitron déclare, par la présente, que ce produit Unitron est conforme aux principales exigences de la directive européenne 1999/5/EC dite « R&TTE » relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications. L'intégralité de la déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant ou du représentant Unitron local dont l'adresse figure sur la liste à consulter sur le site www.unitron.com (sites internationaux).

Notification 1 :

Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS-210 de l'industrie canadienne. Le fonctionnement du dispositif est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- 2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Notification 2 :

Toute altération ou modification apportée à ce dispositif sans l'accord exprès d'Unitron peut mettre fin à l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil.

Notification 3 :

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de Classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC et de la norme ICES-003 de l'industrie canadienne. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle.

Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une interférence ne se produise pas avec une installation particulière. Au cas où ce dispositif causerait une interférence nocive sur la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est recommandé d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Repositionnement ou déplacement de l'antenne de réception.

Augmentation de la distance entre l'appareil et le récepteur
Connecter le dispositif à une prise ou à un circuit différent de celui du récepteur.

Prise de contact avec le revendeur de l'appareil ou un technicien radio/TV qualifié.

Notification 4 :

Déclaration FCC/IC sur l'exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC et IC, relatives à l'exposition aux rayonnements, établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour répondre aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être localisé ni utilisé conjointement avec tout autre émetteur ou antenne.

Australie : Code fournisseur :  N15398

Nouvelle-Zélande : Code fournisseur : Z1285

Informations et explications relatives aux symboles



Avec le symbole CE, Unitron déclare que ce produit Unitron satisfait aux exigences de la directive européenne 1999/5/CE dite « R&TTE » relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications. Les chiffres associés au symbole CE correspondent aux codes des institutions certifiées consultées pour les directives ci-dessus.



Ce symbole indique qu'il est essentiel que l'utilisateur lise les informations importantes de ce mode d'emploi et en tienne compte.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur accorde une attention particulière aux avertissements de ce mode d'emploi.



Information importante pour la manipulation et la sécurité du produit.



Étiquette de conformité concernant la compatibilité électromagnétique et les radiocommunications en Australie.

Conditions de fonctionnement :

Cet appareil est conçu pour fonctionner sans problème ni restriction s'il est utilisé normalement, sauf précision contraire spécifiée dans le guide d'utilisation.

0° à 55° degrés Celsius et humidité relative < 95 %
(sans condensation).

Conditions de transport et de stockage :

Température : -20° à +60° degrés Celsius (-4° à +140 degrés Fahrenheit). Humidité durant le transport : Jusqu'à 90 % (sans condensation). Humidité durant le stockage : 0 à 70 %, lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Pression atmosphérique : Entre 200 et 1 500 hPa.



Le symbole représentant une poubelle barrée vous indique qu'il ne faut pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers. Veuillez rapporter tout appareil inutilisé dans les lieux de collecte des équipements électroniques ou le confier à votre audioprothésiste qui le mettra au rebut de façon appropriée. Une mise au rebut appropriée contribue à protéger l'environnement et la santé.

Ce produit est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être remplacée. Afin d'éviter toute blessure ou d'endommager le produit, n'essayez ni d'ouvrir celui-ci ni de retirer la batterie.

Contactez votre centre de tri local qui se chargera de retirer la batterie.



La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Unitron est soumise à une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Représentant européen

Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Allemagne

La liste des entreprises du groupe
Unitron est disponible sur le site Web
www.unitron.com/fr



Distributeur

www.unitron.com/fr



12-021 029-5905-04

